


Incubateur climatique grande capacité (ICB-500SC / 1000DC / 1500TC)

Réf. : ICB-500SC • ICB-1000DC • ICB-1500TC

36 MONTH WARRANTY CE FDA

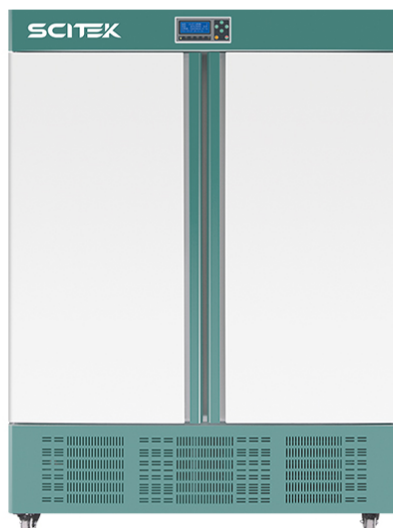

SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-500SC	ICB-1000DC	ICB-1500TC
Capacité (L)	500	1000	1500
Plage de température	Sans éclairage 0–50 °C ; avec 10–50 °C	Sans éclairage 0–50 °C ; avec 10–50 °C	Sans éclairage 0–50 °C ; avec 10–50 °C
Résolution / fluctuation	0,1 °C / ±1 °C	0,1 °C / ±1 °C	0,1 °C / ±1 °C
Afficheur	Écran LCD 7"	Écran LCD 7"	Écran LCD 7"
Dimensions internes (l×P×H) (mm)	640×620×1300	1200×620×1200	1730×620×1300
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	740×780×1900	1300×780×1830	1830×780×1930

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largement utilisé pour la croissance des plantes, la germination des graines, la culture de plants et de micro-organismes. Adapté aux biotechnologies, sciences agricoles et forestières, aquaculture, etc.

Caractéristiques :

Système de commande

micro-ordinateur à 9 modes de fonctionnement, affichage LCD en temps réel.

Structure

intérieur en inox, extérieur en tôle laquée.