


Stérilisateur plasma basse température au peroxyde d'hydrogène — solution (ST-HT100PI / ST-HT140P / ST-HT190P)

Réf. : ST-HT100PI • ST-HT140P • ST-HT190P

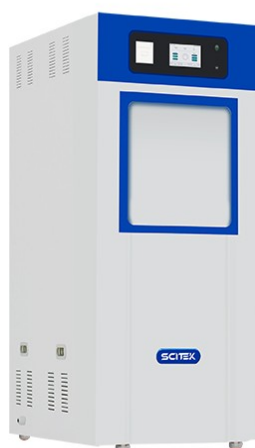

SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ST-HT100PI	ST-HT140P	ST-HT190P
Volume de chambre	100 L	135 L	190 L
Construction	Aluminium 5052	Aluminium 5052	Aluminium 5052
Température de traitement	45–55 °C	45–55 °C	45–55 °C
Système de commande	Siemens PLC	Siemens PLC	Siemens PLC
Afficheur	Écran tactile 7"	Écran tactile 7"	Écran tactile 7"
Imprimante	Thermique	Thermique	Thermique
Durée totale de cycle	Court 30 min / long 50 min / lumière 60 min	Court 30 min / long 50 min / lumière 60 min	Court 30 min / long 50 min / lumière 60 min
Niveau sonore	< 60 dB	< 60 dB	< 60 dB
Porte	Automatique	Automatique	Automatique
Alimentation	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz
Consommation	3,4 kW	3,5 kW	4,3 kW
Dimensions internes (l×P×H) (mm)	430×700×360	450×750×400	510×820×460
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	790×1067×1782	790×1067×1782	790×1067×1782

Les stérilisateurs plasma basse température au peroxyde d'hydrogène servent à stériliser les dispositifs médicaux et dentaires, équipements de laboratoire, produits pharmaceutiques, instruments vétérinaires et outils de l'esthétique thermosensibles, en préservant les matériaux délicats.

Avantages :

- Stérilisation à basse température, sans endommager les articles délicats.
- Procédé écologique sans pollution (solution de peroxyde d'hydrogène).
- Stérilisation stable, température équilibrée et concentration de H₂O₂ stable.
- Chambre de stérilisation rectangulaire pour une capacité de charge accrue.

Fonctionnement sûr	porte à élévation électrique et verrouillage de sécurité.
Utilisation simple	processeur intelligent et démarrage par une touche.

- Composants de haute qualité, performance fiable.
- Cycle court, faibles coûts de fonctionnement.
- Filtre stérile en entrée d'air contre la pollution secondaire.
- Stockage des données sur carte mémoire.